



Stolelifte til trapper med sving

Handicare 2000 | 2000 Simplicity



Fordelene ved en Handicare stolelift

Har du det svært med at komme op og ned ad trappen, er du ikke alene. Hvert år kigger tusindvis af mennesker sig om efter en løsning, så de fortsat kan forcere trappen i eget hjem.

Beslutningen at installere en stolelift kan virke besværlig, men sammenlignet med alternativet - at skulle flytte, eller begrænse sig til den ene etage i hjemmet - foretrækker de fleste dog denne mulighed.

Overvejer du at installere en stolelift, og har du en vindeltrappe eller en trappe med sving, kan en Handicare 2000 tilbyde dig en både sikker og pålidelig løsning.

Handicares stolelifte har hjulpet mange mennesker med problemer med at skulle gå op og ned ad trappen i hjemmet.

Handicare 2000 stoleliftene er egnede til de fleste trapper med sving og tilbyder dig alle nødvendige basisfunktioner samt mulighed for at opgradere til en automatisk fodplade og/eller automatisk drejefunktion af sædet.




Den skræddersyede løsning

Perfekt tilpasset, 100% efter mål...og alligevel hurtigt installeret i dit hjem. På et uforpligtende besøg vil vi i detaljer forklare alle stoleliftenes funktioner for dig.



Hver eneste Handicare stolelift er designet til at passe til lige præcis din trappe. Ud fra en avanceret fotooptagelse foretages en præcis opmåling af din trappe, og vi har alle nødvendige oplysninger til at sikre dig den bedst mulige tilpasning til din trappe.

Din Handicare 2000 stolelift kan leveres med to forskellige sæder. Din Handicare forhandler vil kunne rådgive dig om, hvad du skal vælge med udgangspunkt i dine behov.

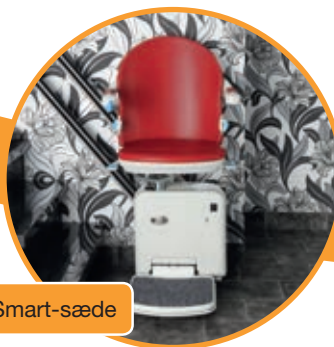

Smart-sæde



Simplicity-sæde



Sædets funktioner



Fjernbetjening

Handicare 2000 leveres med to fjernbetjeninger, der fx. gør det nemt for dig at returnere stolen til ladepunktet på øverste etage, hvilket frigiver plads i din entre.



1

Sikkerhed er standard

En række sikkerhedssensorer er udviklet til at stoppe din Handicare 2000 stolelift, hvis du møder nogle forhindringer på din tur op ad trappen.



2

Foldbar

Den kompakte stol kan foldes op og efterlader derved trappen fri til at passere for andre brugere. De skræddersyede skinner er konstrueret til din individuelle trappe og tillader derved mest mulig plads på trappen. Ved behov kan stoleliften også leveres med el-dreven vipbar skinne.

Batteri

Som alle andre Handicare stolelift er 2000-serien forsynet med batteribackup, hvilket betyder, at stolen fortsat vil virke i tilfælde af strømsvigt, så du ikke behøver bekymre dig om at kunne komme op eller ned.





Nem at betjene

Vippekontakten er nem at bruge: hold den inde i den retning, du vil køre - op eller ned - og din stolelift kører jævnt og roligt den vej.



Sikkerhedssele

Som ekstra sikkerhed kommer din Handicare 2000 med en selvopullende sikkerhedssele, der let klikkes sammen. Hvis du foretrækker velcrolukning er dette også en mulighed.



Display

Handicare 2000 har et display, der gør det nemt for dig at se status på din stolelift, fx. hvis en sikkerhedsswitch er blevet aktiveret.



Komfort

El-dreven vipbar skinne

Enkelte huse har en døråbning neden for trappen og liftens skinner kan blokere døråbningen.

Et el-drevet, vipbart skinned vil kunne monteres i disse huse. Det betyder, at skinnen kan vippes væk fra døråbningen og give fri passage.

Når stoleliften betjenes fra vippekontakten, vil skinnen automatisk køre op og ned.



Automatisk drejefunktion af sæde

Når du ankommer til toppen af trappen, har du brug for at dreje sædet, så du kan forlade stolen sikkert. Vælges den automatiske drejefunktion af sædet, styres den ved, at du holder vippekontakten inde, når du når toppen af trappen. Sædet vil så dreje automatisk.



Maks. last

Som standard er den maksimale belastning for Handicare 2000 serien 115 kg. Maksimal belastning i heavy duty udgaven (ekstraudstyr) er 137 kg.

El-dreven fodplade

Både fodpladen og sædet kan foldes op for at give så meget plads som muligt på trappen for andre brugere. Den el-drevne fodplade vil fjerne behovet for, at du skal bøje dig ned for at folde fodpladen op.



Farvevalg

Idet Handicare 2000 monteres på trappen og ikke på væggen, er det usandsynligt at du skal istandsætte efter installation. Smart-sædet fås i seks farver og skinnerne i tre farver, så der er mulighed for at matche til den eksisterende indretning.

Ståsæde

Med nedsat funktionsevne i knæ eller hofte, kan det være pinefuldt at sidde ned. I disse situationer kan et ståsæde være løsningen.

Et ståsæde betyder, at brugeren befinder sig i næsten stående stilling, når stoleliften anvendes. Det kortere sæde kombineret med sikkerhedsselen giver en stabil støtte for brugeren at læne sig op ad. Sædet fås i seks farver.



Oversigt over Handicare stolelifte til trapper med sving:

Sæde	2000	2000 Simplicity	
Farvevalg polstring	✓	-	Et udvalg på 6 farver giver dig mulighed for at matche til din indretning.
Automatisk drejefunktion	○	-	Gør det så nemt som muligt at dreje sædet, for at komme lettere af og på.
Selvoprullende sikkerhedssele	✓	✓	Selvoprullende cremefarvet sele som lukkes midt på eller en af siderne.
Sikkerhedssele med velcro	○	○	Sort sele med velcro på en af selerne for holdbar lukning.
Ståsåde	○	-	Ideel for brugere, der har besvær med at bøje i knæ eller hofte.
Fodplade	2000	2000 Simplicity	
Manuel	✓	✓	Fodpladen foldes op og ned manuelt.
Styret fra sæde	○	○	Fodpladen folder sig op, når sædet foldes op.
Styret fra armlæn	○	-	Fodpladen foldes op og ned, når brugeren sidder i stolen, via en kontakt på armlænet.
Skinne	2000	2000 Simplicity	
Kører om hjørner og sving	✓	✓	Til de fleste trapper, lige fra et til flere sving eller vindeltrappe.
Fleire ladepunkter	✓	✓	Brug fjernbetjeningen til at parkere på ladepunkterne.
Skinne i valgfri farve	○	○	Tilpas din skinne til din indretning.
Ingen afspærring v. toppen af trappen	○	○	Bruges hvis skinnen spærrer for en døråbning ved toppen af trappen.
El-dreven vipbar skinne	○	○	Løfter automatisk skinnen foran en døråbning væk, mens liften er i brug.
Maks. last	2000	2000 Simplicity	
Standard maks. last	115kg	115kg	
Maks. last med ekstraudstyr	137kg	137kg	
Standarder	2000	2000 Simplicity	
EN 81-40: Trappelifte mv	✓	✓	

✓ standard ○ Tilvalg - Ikke mulig

Farvevalg polstring Smart-sæde



KAKAOBRUN



RUBINRØD




SAND



SAFIRBLÅ



SKIFERGRÅ

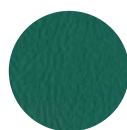

JADEGRØN

Farvevalg polstring Simplicity-sæde



SAND

Vær venligst opmærksom på, at de aktuelle farver kan variere en smule fra de viste

Farvevalg skinne 2000 serien



LYSEGRÅ



BRUN



METALGRÅ

Handicare tilbyder også, at skinnen kan laves i lige præcis den farve, der matcher din indretning.

Gør hverdagen lettere

Erfaring

Mennesket søger bekvemmelighed.... Og Handicares liftprodukter har bidraget til dette i mere end 125 år.


Handicares udvikling af tekniske funktioner, intelligente løsninger og sikker anvendelse har ikke blot bidraget til større komfort, men også til mere attraktive stolelifte...til din stil og i din smag.

Topkvalitet i alle sammenhænge gør Handicares stolelifte til et værdifuldt aktiv for uafhængighed i hjemmet. Mange tilfredse brugere oplever det hver eneste dag.

Kvalitet og sikkerhed

Vi yder 2 års garanti på alle vores nye produkter.

En Handicare stolelift står for høj kvalitet både når vi taler sikkerhed og udvikling, men også komfort og design. Alle vores produkter er testet og godkendt af internationale og uafhængige inspektionsfirmaer. Det er din sikkerhed for, at alle vores produkter lever op til de højeste standarder for kvalitet og sikkerhed.



Vær venligst opmærksom på, at de aktuelle farver, kan variere en smule fra de viste. Al information er givet i god tro, men er ikke en garanti. Handicare forbeholder sig ret til at ændre design og specifikationer uden forudgående varsel.

Liftup A/S
Hagensvej 21
DK-9530 Støvring

+45 9686 3020
mail@liftup.dk
www.liftup.dk